

Armario de Almacenaje con Filtro



Armario de
almacenamiento para
ensayos anatómicos
en formol

GS1000 AP



La serie GS1000 AP es la nueva solución para la protección de los operadores de laboratorio de la exposición a concentración nociva de productos con vapores tóxicos durante las operaciones de anatomía patología de laboratorio.

La serie GS1000 AP cumple con los requisitos de la norma DL 626/94, que impone la reducción de vapores tóxicos y contaminantes durante el proceso de almacenamiento, y la norma COSHH-1988, que se refiere al control de sustancias peligrosas para la salud.

Características de la serie GS1000 AP:

- **Cámara hermética dinámica** para garantizar la mejor contención
- **Parte inferior especialmente diseñada para la ventilación de las sustancias más pesadas**
- **Sistema de filtro de especial aldehído** (espesor: 100 mm, peso: 15 kg) y una disposición para la instalación de un secundario sistema de filtros de seguridad)
- **Apertura de la división horizontal de la guillotina de seguridad** para garantizar la máxima seguridad
- **Vidrio frontal templado de seguridad**
- **Variación de la velocidad del ventilador automático durante la apertura de la guillotina**
- **Listo para usar y fácil de instalar**


SERIE GS1000 AP

La filtración molecular se condujo con el uso de la alta eficiencia del filtro de carbón activo especialmente para producir vapores de aldehído. El polvo se elimina para no reducir la eficiencia de los filtros de carbono con el uso de un sistema de pre-filtro.

El aire filtrado agotado puede ser reciclado dentro del entorno del laboratorio sin la necesidad de recalentamiento / reacondicionamiento o podría ser impulsado hacia el exterior con un sistema de conductos.

Información Técnica:

- Estructura de aluminio y acero pintado con pintura especial epoxi-poliéster con base ajustable para la nivelación
- Velocidad variable controlada electrónicamente por el ventilador
- Sistema de filtro: tamaño pre-filtro electrostático; tipo Filtrete (con 97% de eficiencia - 0,5 micras dimensión de partículas) y carbón activado talla B
- Los vapores diferenciales de ventilación (en cada estante y parte inferior de la vitrina)
- Altura vertical ajustable de la plataforma con el sistema anti-fugas
- Fondo en acero inoxidable
- Espesor de vidrio templado frontal: 5 mm
- 0,3 a 0,5 m / s frente a la velocidad de flujo de aire
- Dos controles de volumen de velocidad de aire variable
- Contador de horas de vigilancia mediante filtro del sistema
- Acústica y el parpadeo de alarma de flujo de aire bajo debido a la saturación del filtro
- Protección eléctrica de clase
- Ruido reducido a menos de 60dB
- 230V-50Hz, 485 vatios, suministro de energía eléctrica
- Equipo estándar de anuncio

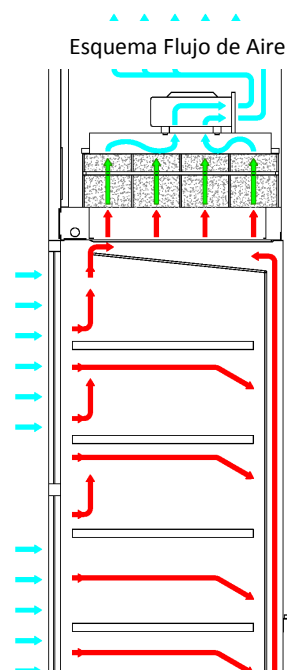

Dimensiones:

GS1000 AP

Externas (mm):
1000 x 755 x 2125
Internas (mm):
980 x 540 x 1541
Apertura (mm):
780 x 745
Peso (Kg):
200

GS1200 AP

Externas (mm):
1200 x 755 x 2125
Internas (mm):
1180 x 540 x 1541
Apertura (mm):
980 x 745
Peso (Kg):
220

